PeriData - MedicalOffice - Interface

Stand: 20.10.2025

J. Weber, PeriData Software GmbH

Allgemeine GDT-Schnittstellenbeschreibung zu PeriData
www.peridata.com/help/html_german/p_ge_linkmode_gdt_specs.htm

Vorbemerkung

Diese Dokumentation ist unvollständig. Die Konfiguration der Schnittstelle liegt in der Hand des Praxissoftware-Providers. Die Informationen sollen nur als Ergänzung dienen

Die folgenden Infos beziehen sich auf einen Windows-PC mit PeriData und ggf. dem Perimeter-Geräte-Programm.

Installation und Verzeichnisse anlegen

1. DATEN- VERZEICHNIS: Anlage des EINZIGEN Daten-Verzeichnisses für permanente Gesichtsfeld-Dateien auf dem Server (z.B. NAS) durch den Techniker

für die PeriData-Files (.PHF und .PHD)

Vorschlag: **<Server> \geraetedaten\PeridataFiles**

2. PROGRAMM: Installation des Programms auf dem Windows-PC

Download der aktuellen Setup-Version von peridata.com und Installation im vorgeschlagenen Verzeichnis auf dem Windows-PC

3. GDT-VERZEICHNIS: für die temporärem GDT-Austausch-Dateien auf dem Windows-PC

C:\GDT\Peridata wird bei der Installation automatisch angelegt

für Import **und** Export der GDT-Files

4. ROHDATEN-VERZEICHNIS: für Rohdaten vom Perimeter auf dem Windows-PC

C:\PeriDataExchange wird bei der Installation automatisch angelegt

NICHT für GDT-Files verwenden !

für temporäre Importfiles (Rohdaten) *.dcm *.pdi *.hfa *.oc1 *.oc5

für Import-Fehlermeldungen Error*.*

Backup-Files der Optionen *.opt

PeriData-Icons und Bitmaps

Unterverzeichnis **Log** für Log-Dateien (Installations-Log, letzte Files, Konfiguration)

Unterverzeichnis **Gdt2Perimeter**: für Datenexport zum Perimeter

Konfiguration in MedicalOffice

Diese Beschreibung ist unvollständig

Stammdaten > Aufträge > Neu

Reiter "Schlüssel"

Schlüssel: PERIDATA

Bezeichnung: "Perimetrie" oder "Gsichtsfelder"

Tarif: alles ankreuzen (BMÄ, GOÄ..)

Auftragsoptionen: Geräteanbindung, Dokumentation ??, ohne Bestätigung

Speichern mit OK

Reiter "Geräteanbindung"

Schnittstelle: GDT

Zeichensatz: Windows

Verfahren: OPTO05 (PeriData sendet immer FK8402=OPTO05) oder freilassen??

Zusatzinfos: NEIN

Ergebnisse speichern: JA

Ergebnis abwarten: NEIN


Exportdatei: C:\GDT\Peridata\perimedi.gdt

Importdatei: freilassen (wird über die MedicalOffice-Zentrale importiert)

Dateiaufnahme-Programm (mit Argumenten): C:\Program Files\PeriData\Periwin\Periwin.exe /Mode:GDT /Client:MedicalOffice /GDT: C:\GDT\Peridata /DATA:\\...\ (der Pfad im Bild ist ein Beispiel)

Auswertungsprogramm: <identischer Pfad mit Argumenten>

DDE: <leer>

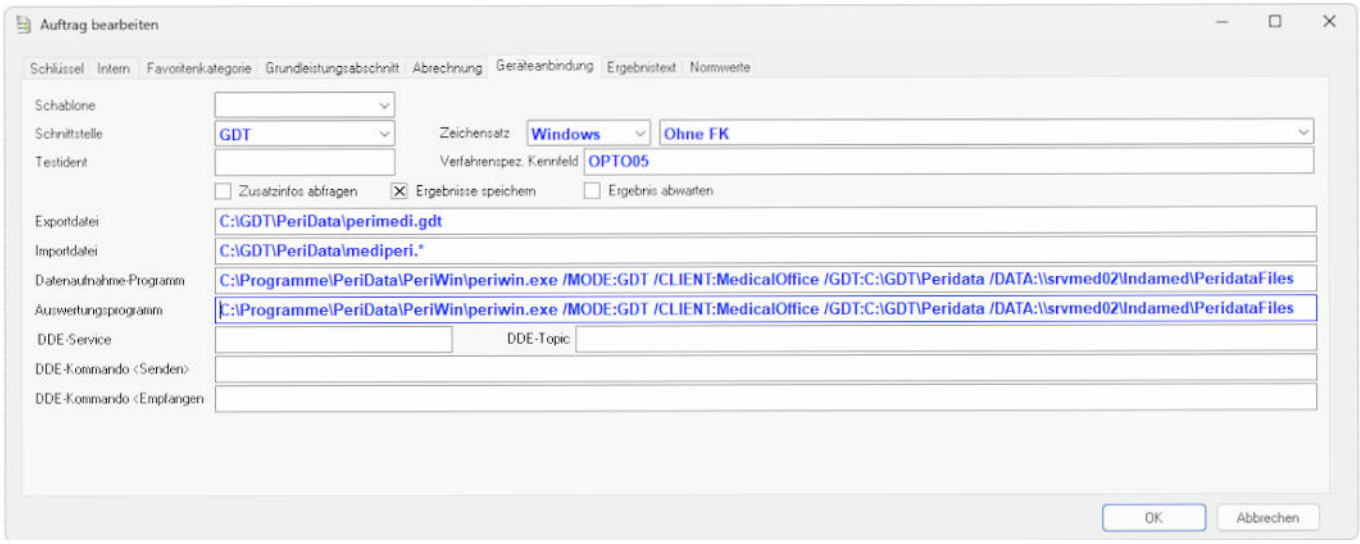

Import definieren

Die Import-Konfiguration ist noch nicht vollständig aktualisiert


Asynchron über das MEDICAL OFFICE – Datenpflegesystem

System > Arbeitsplatz > Allgemein > Reiter Im-/Export

BDT-/GDT/LDT-Import

xDT-Importpfad: C: \GDT\Peridata

xDTDateiendung: **.0*** (Punkt Null Stern - PeriData kann mehrere files für mehrere Untersuchungen schicken und verwendet daher die Filenamen MediPeri.001 MediPeri.002 MediPeri.003)

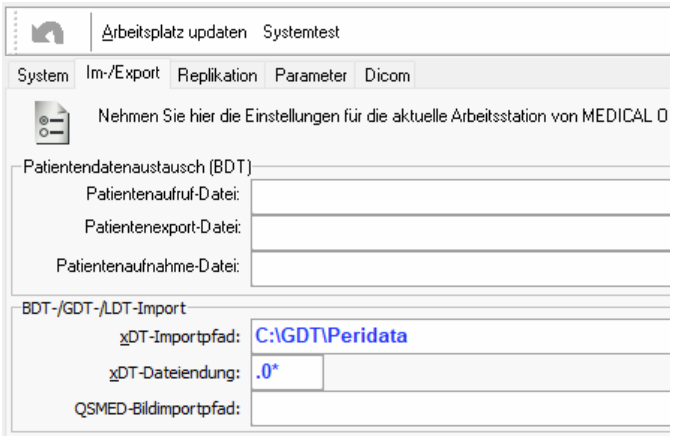

Inhalte aus der Importdatei

Da die Software-Programme die Importdateien unterschiedlich auswerten, sind viele Infos von PeriData doppelt

Untersuchungsdatum ist in Feldkennung 6200 und 8432

Untersuchungszeit ist in Feldkennung 6204 und 8439
Kommentar ist in Feldkennung 6227

---------- ENDE ----------